

UED Group.

Комплексное оснащение лабораторий
Поставка оборудования, посуды и реактивов



РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Серия лабораторного оборудования UED Group - это современное, наукоемкое и надежное оборудование производства нашей компании ООО "УЕД". Мы даем гарантию 1 год на все производимое нами оборудование

О КОМПАНИИ

Компания UED Group с 2013 года занимается разработкой и производством лабораторного оборудования, посуды и аксессуаров для химических процессов для лабораторий России и СНГ. Мы также являемся официальными дилерами нескольких десятков компаний-производителей различных линеек оборудования (российские и зарубежные компании).

01



У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
ЛУЧШЕЕ ЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ
ПОЛНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ЛАБОРАТОРИИ

02

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕМИУМ-
КЛАССА ОТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

03

ГРАМОТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
И БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ. УСТАНОВКА,
НАСТРОЙКА И ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА

05



МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
УСТАНОВКУ, РЕМОНТ,
СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРОВОДИМ
АТТЕСТАЦИЮ ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

04

ОТПРАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
И ДРУГИХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ КЛИЕНТАМ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
НАДЕЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
КОМПАНИЙ

НАША ЦЕЛЬ

Повысить уровень технической оснащенности компаний России и СНГ, помочь им выйти на новый уровень развития, соответствующий мировым стандартам.

Инновационные технологии и сертифицированные материалы, используемые при производстве рассматриваемых товаров, являются залогом их долговечности и практичности. Также предлагаемые изделия отличаются повышенной экологичностью и эргономичностью.

Верхнеприводные мешалки	04
Сушильные шкафы	06
Вакуумные сушильные шкафы	08
Вакуумные водоструйные насосы	10
Аквадистилляторы	12
Магнитные мешалки с нагревом	14
Водяные бани	16
Глубокие водяные бани	18
Колбонагреватели	20
Муфельные печи	26
Нагревательные плитки	28
Масляные бани	30

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА НАШЕМ САЙТЕ



ВЕРХНЕПРИВОДНЫЕ МЕШАЛКИ

Верхнеприводные мешалки UED предназначены для равномерного механического перемешивания, гомогенизации текучих и вязких жидкостей, размешивания твердых частиц в жидкостях, приготовления суспензий, гелей, эмульсий, а также для внедрения газов.

СКОРОСТНОЙ
ДИАПАЗОН

100-1500 ОБ/МИН

ИНДИКАЦИЯ
СКОРОСТИ

**СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ,
ЦИФРОВАЯ РЕГУЛИРОВКА
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ**



01

Мешалка имеет плавный ход, обладая высоким крутящим моментом и низким уровнем шума



02

Верхнеприводные механические мешалки оборудованы двигателем постоянного тока с бесступенчатой регулировкой скорости

03

Могут перемешивать вещества разной плотности и структуры, выполняют газирование, т.е. насыщают жидкости техническим газом (например, воду углекислым газом)

ОПЦИОНАЛЬНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕШАЛЬНИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ РАБОТ

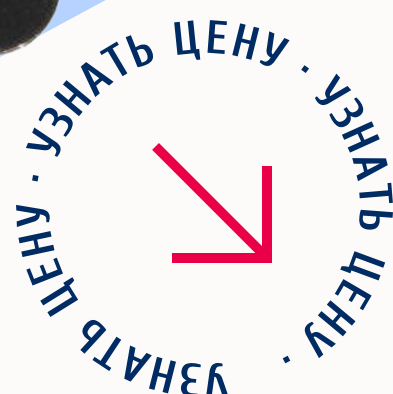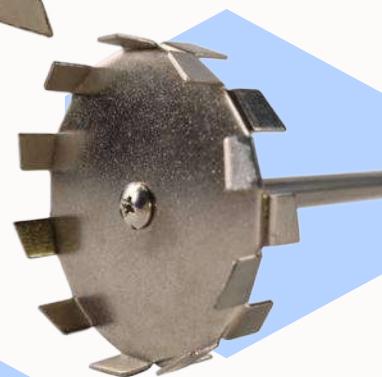

МОДЕЛЬ	UED-5	UED-10	UED-20
ОБЪЕМ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ	5 л	10 л	20 л
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	200x280x660 мм	200x280x660 мм	200x280x660 мм
МОЩНОСТЬ	60 Вт	100 Вт	200 Вт

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Сушильные шкафы с принудительной конвекцией предназначены для сушки сырья и материалов, стерилизации, термической обработки.



УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ

ОПЦИОНАЛЬНО

- МЕТОДИКА АТТЕСТАЦИИ
- АТТЕСТАЦИЯ

01

Камера сушильного шкафа изготовлена из нержавеющей стали, корпус из холоднокатаной стали с электростатическим напылением, что обеспечивает эстетичность и долговечность изделия

02

Регулируемые полки, разборная конструкция боковой пластины воздуховода и нижней крышки нагревателя для удобства очистки и дезинфекции

03

Может быть дополнительно оборудован микропринтером с функцией непрерывного вывода температуры во время работы печи.



ВЕСОВАЯ
НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

15

ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР

+10~300°C

РЕЖИМ
НАГРЕВА

**ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
КОНВЕКЦИЯ**

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

**PID КОНТРОЛЬ
С ГИБКОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ**

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБОР

**АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**

УЗНАТЬ ЦЕНУ
УЗНАТЬ ЦЕНУ
УЗНАТЬ ЦЕНУ

МОДЕЛЬ	UED-30	UED-65	UED-85	UED-125	UED-230
ОБЪЕМ	30 л	65 л	85 л	125 л	230 л
РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	310x310x310 мм	400x360x450 мм	450x450x450 мм	500x450x550 мм	600x500x750 мм
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	428x500x723 мм	518x550x863 мм	568x640x863 мм	618x640x963 мм	737x700x1266 мм
МОЩНОСТЬ	0.8 кВт	1.6 кВт	1.8 кВт	2.3 кВт	3.0 кВт

ВАКУУМНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Подходит для сушки термочувствительных, легко разлагающихся, легко окисляемых веществ и примесей.



ВАКУУМЕТР ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ
СТЕПЕНИ ВАКУУМА

УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ

01

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КОРПУС ИЗ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ, ПОКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭСТЕТИЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

02

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КОРПУС ИЗ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ, ПОКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭСТЕТИЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

03

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛКИ, РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОКОВОЙ ПЛАСТИНЫ ВОЗДУХОВОДА И НИЖНЕЙ КРЫШКИ НАГРЕВАТЕЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБСТВО ОЧИСТКИ



ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР

+10 ~ 250°C

КОЛЕБАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

±1°C

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

**PID КОНТРОЛЬ
С ГИБКОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ**

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБОР

**АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**



МОДЕЛЬ	UED-24D	UED-52D
ОБЪЕМ	24 л	52 л
РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	300x300x270 мм	415x370x340 мм
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	480x480x606 мм	560x540x680 мм
МОЩНОСТЬ	0.8 кВт	1.4 кВт

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

Вакуумный водоструйный насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей воды для широкого спектра применений, таких как испарение, дистилляция, кристаллизация, фильтрация, сублимация и т.д.



УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ

01

Является новым поколением многоцелевых насосов, использующих циркулирующую воду в качестве рабочей жидкости и механизм струи для создания принципа отрицательного давления

02

Устойчив к воздействию паров кислот, щелочей, растворителей. Уплотнители из фторированной резины устойчивы к коррозионным парам.

03

Жидкостной глушитель уменьшает количество газа в воде и повышает уровень вакуума, а также делает его более стабильным. Уменьшение трения между газом и жидкостью уменьшает шум.



ДОСТИЖИМЫЙ ВАКУУМ

0,098 МПА

МАТЕРИАЛ
КАМЕРЫ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

**КОРРОЗИОННОУСТОЙЧИВЫЙ
ПЛАСТИК**



МОДЕЛЬ	UED-10L	UED-80L
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	+3 +40 °C	0 +25 °C
ВМЕСТИМОСТЬ ЕМКОСТИ ДЛЯ ВОДЫ	15 л	50 л
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	< 85 %	< 85 %
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	395x290x420 мм	420x510x920 мм
МОЩНОСТЬ	180 Вт	370 Вт

АКВАДИСТИЛЛЯТОРЫ

Электрический аквадистиллятор UED для получения дистиллированной воды медицинского, бытового и технического назначения.

УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ



01

ДИСТИЛЛЯТОР ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

02

ОСНАЩЕН ДАТЧИКАМИ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВОДЫ, ЗВУКОВОЙ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ, СЪЕМНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

03

ИЗДЕЛИЕ СОСТОИТ ИЗ ВЫПАРИТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА, НАГРЕВАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, КОНДЕНСАТОРА И ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ



ПАРАМЕТР \ МОДЕЛЬ	UED-5L	UED-10L	UED-20L
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5 л/ч	10 л/ч	20 л/ч
МОЩНОСТЬ	4.5 кВт	7.5 кВт	15 кВт
НАПРЯЖЕНИЕ	220 В	380 В	380 В
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	380x730 мм	335x830 мм	405x980 мм
ВЕС	5 КГ	7 КГ	12 КГ

ФУНКЦИЯ СМОТРОВОГО ОКНА РЕАЛИЗОВАНА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ СООБЩАЮЩИХСЯ СОСУДОВ. ПРИ ДОСТИЖЕНИИ УРОВНЯ ВОДЫ В БАКЕ НИЖЕ КРАСНОЙ ОТМЕТКИ СРАБАТЫВАЕТ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГОРАНИЯ, И АКВАДИСТИЛЛЯТОР ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ

ЗАПАСНЫЕ ТЭНЫ В НАБОРЕ (ОПЦИОНАЛЬНО)

Со временем ТЭНы могут выходить из строя. На износ нагревательного устройства влияют:

- скачки напряжения в сети;
- пробой на корпусе;
- низкое качество воды: с большим содержанием солей и других примесей.

Для бесперебойной работы с аквадистиллятором необходимо иметь запасной ТЭН.



МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ С НАГРЕВОМ

Магнитные мешалки с нагревом UED используются для перемешивания и нагрева химических реактивов и других лабораторных образцов до 350°C со скоростью до 1500 оборотов в минуту на многих производствах химических лабораториях и научных институтах.

УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ



01

КОРПУС ИЗ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ С НАПЫЛЕНИЕМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭСТЕТИЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

02

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗГОТОВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИХРОМОВОГО ШНУРА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

03

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПИД-КОНТРОЛЛЕР ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАДАННЫЕ ВАМИ ПАРАМЕТРЫ ФАНТАСТИЧЕСКИ ТОЧНО



СКОРОСТЬ
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

100-1500
ОБ/МИН

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+5~350°C

ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕ,

МОДЕЛЬ	UED-10	UED-20	UED-20D
ОБЪЕМ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ	до 2 л	до 20 л	до 20 л
НАЛИЧИЕ ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА	НЕТ	НЕТ	ДА
РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	Ø 125 мм	180x180 мм	180x180 мм
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	300x200 мм	400x300 мм	400x300 мм
МОЩНОСТЬ	250 Вт	600 Вт	600 Вт

ВОДЯНЫЕ БАНИ

Водяная баня UED применяется для дистилляции, дегидратации, мацерации методом нагрева и обогащения химических реактивов, биопрепаратов и других лабораторных образцов до 100°C на многих производствах химических лабораториях и научных институтах.

УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ



01

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МЕТОДОМ ШТАМПОВКИ С ВЫТЯЖКОЙ

02

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРУБКИ НАГРЕВА, ПОМЕЩЕННОЙ В ВОДУ, АППАРАТ БЫСТРО НАГРЕВАЕТ ВОДУ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕРМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

03

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР ОТСЛЕЖИВАЕТ ПОДЪЕМ И СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ



ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР

+5~100°C

КОЛЕБАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

±0.5°C

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

**PID КОНТРОЛЬ
С ГИБКОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ**

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБОР

**ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
ПО ТОКУ**



С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРЕВА	UED-1S	UED-2S	UED-4D	UED-6D	
БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА	UED-1SE	UED-2SE	UED-4DE	UED-6DE	UED-8DE
ОБЪЕМ	3 л	6 л	12 л	18 л	25 л
РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ (ШхВхГ)	160x160x130 мм	305x160x130 мм	305x305x130 мм	470x305x130 мм	635x325x130 мм
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	200x200x220 мм	345x200x220 мм	345x345x220 мм	510x345x220 мм	680x345x220 мм
МОЩНОСТЬ	300 Вт	600 Вт	800 Вт	1200 Вт	2000 Вт

ГЛУБОКИЕ ВОДЯНЫЕ БАНИ

Глубокие водяные бани UED применяются для дистилляции, дегидратации, мацерации методом нагрева и обогащения химических реактивов, биопрепаратов и других лабораторных образцов до 100°C.



УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ

01

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МЕТОДОМ ШТАМПОВКИ С ВЫТЯЖКОЙ

02

АРОЧНАЯ КРЫШКА ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫСОКИЕ БУТЫЛКИ, ШТАТИВЫ С ПРОБИРКАМИ ИЛИ КОЛБЫ ЭРЛЕНМЕЙЕРА И ДР.

03

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР ОТСЛЕЖИВАЕТ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ И НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР

+5~100°C

КОЛЕБАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

±0.5°C

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

**PID КОНТРОЛЬ
С ГИБКОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ**

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБОР


**АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**



МОДЕЛЬ	UED-11D	UED-22D	UED-15D	UED-30D
ОБЪЕМ	11 л	22 л	15 л	30 л
РАЗМЕР КАМЕРЫ (ШхВхГ)	300х240х150 мм	500х290х150 мм	300х240х200 мм	500х290х200 мм
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	340х280х240 мм	550х350х240 мм	340х280х290 мм	550х350х290 мм
МОЩНОСТЬ	800 Вт	1200 Вт	1000 Вт	1500 Вт

АНАЛОГОВЫЕ КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ

Аналоговые колбонагреватели UED для нагрева химических реактивов, материалов биопрепаратов и других лабораторных образцов до 380°C используются на многих производствах химических лабораториях и научных институтах.

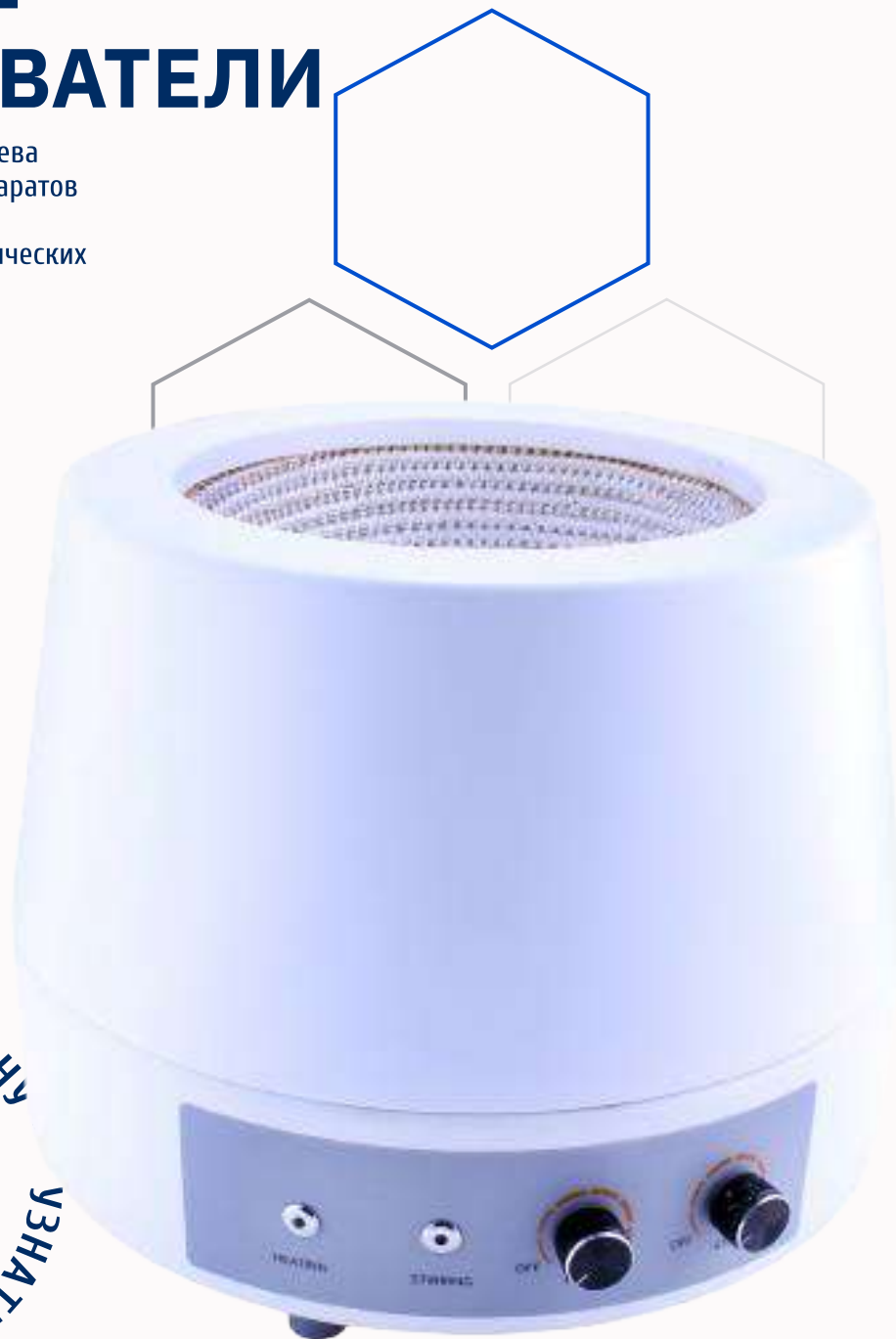

01

КОРПУС ИЗ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ С НАПЫЛЕНИЕМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭСТЕТИЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

02

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗГОТОВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИХРОМОВОГО ШНУРА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

03

ФОРМА НАГРЕВАТЕЛЯ ТОЧНО ПОВТОРЯЕТ ФОРМУ КРУГЛОДОННЫХ КОЛБ, УМЕНЬШАЯ ТЕМ САМЫМ ТЕПЛОПОТЕРИ И ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТРОЙСТВА В ЦЕЛОМ



МОДЕЛЬ		ПАРАМЕТР		
БЕЗ МАГНИТНОЙ МЕШАЛКИ	С МАГНИТНОЙ МЕШАЛКОЙ	ОБЪЕМ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	МОЩНОСТЬ
UED-100A	UED-100AS	100 мл	φ200×160 мм	100 Вт
UED-250A	UED-250AS	250 мл	φ200×160 мм	150 Вт
UED-500A	UED-500AS	500 мл	φ200×160 мм	250 Вт
UED-1000A	UED-1000AS	1000 мл	φ260x200 мм	350 Вт
UED-2000A	UED-2000AS	2000 мл	φ300x230 мм	450 Вт
UED-3000A	-	3000 мл	φ340x245 мм	600 Вт
UED-5000A	-	5000 мл	φ370x260 мм	800 Вт
UED-10000A	-	10000 мл	φ390x330 мм	1200 Вт
UED-20000A	-	20000 мл	480x480x385 мм	2500 Вт

МАХ ТЕМПЕРАТУРА
НАГРЕВА


380°C

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
(для позиций с мешалкой)

100-1500 об/мин



**АНАЛОГОВЫЕ КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ С МАГНИТНОЙ
МЕШАЛКОЙ КОМПЛЕКТУЮТСЯ ЯКОРЕМ
ФЕРРИТОВЫЙ СЕРДЕЧНИК В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ФТОРОПЛАСТА**

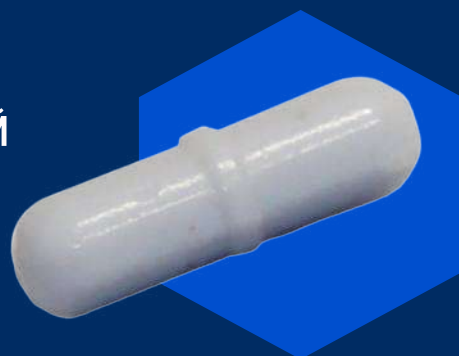

ЦИФРОВЫЕ КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ

Цифровые колбонагреватели UED для нагрева химических реактивов, материалов биопрепаратов и других лабораторных образцов до 380°C используются на многих производствах химических лабораториях и научных институтах.



УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ

01

КОРПУС ИЗ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ С НАПЫЛЕНИЕМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭСТЕТИЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

02

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗГОТОВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИХРОМОВОГО ШНУРА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

03

ФОРМА НАГРЕВАТЕЛЯ ТОЧНО ПОВТОРЯЕТ ФОРМУ КРУГЛОДОННЫХ КОЛБ, УМЕНЬШАЯ ТЕМ САМЫМ ТЕПЛОПТЕРИ И ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТРОЙСТВА В ЦЕЛОМ



МОДЕЛЬ		ПАРАМЕТР		
БЕЗ МАГНИТНОЙ МЕШАЛКИ	С МАГНИТНОЙ МЕШАЛКОЙ	ОБЪЕМ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	МОЩНОСТЬ
UED-100D	UED-100DS	100 мл	φ200×160 мм	100 Вт
UED-250D	UED-250DS	250 мл	φ200×160 мм	150 Вт
UED-500D	UED-500DS	500 мл	φ200×160 мм	250 Вт
UED-1000D	UED-1000DS	1000 мл	φ260×200 мм	350 Вт
UED-2000D	UED-2000DS	2000 мл	φ300×230 мм	450 Вт
UED-3000D	-	3000 мл	φ340×245 мм	600 Вт
UED-5000D	-	5000 мл	φ370×260 мм	800 Вт

МАХ ТЕМПЕРАТУРА
НАГРЕВА

380°C


СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
(для позиций с мешалкой)

100-1500 ОБ/МИН

УЗНАТЬ ЦЕНУ

**АНАЛОГОВЫЕ КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ С МАГНИТНОЙ
МЕШАЛКОЙ КОМПЛЕКТУЮТСЯ ЯКОРЕМ**

ФЕРРИТОВЫЙ СЕРДЕЧНИК В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ФТОРОПЛАСТА

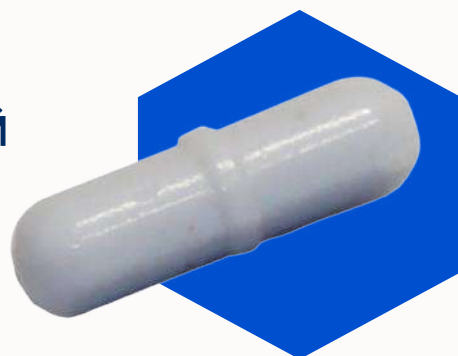

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

Колбонагреватели высокой мощности UED используются для нагрева химических реактивов, материалов биопрепаратов и других лабораторных образцов до 600°C на многих производствах химических лабораториях и научных институтах.



01

НАСТРАИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ синхронизацию времени и температуры нагрева

02

ВСТРОЕННАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГОРАНИЯ, А ТАКЖЕ ОСНАЩЕНА СИСТЕМОЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУР

03

ФОРМА НАГРЕВАТЕЛЯ ТОЧНО ПОВТОРЯЕТ ФОРМУ КРУГЛОДОННЫХ КОЛБ, УМЕНЬШАЯ ТЕМ САМЫМ ТЕПЛОПТЕРИ И ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТРОЙСТВА В ЦЕЛОМ



МАХ ТЕМПЕРАТУРА
НАГРЕВА

380°C

КОЛЕБАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

±0.5°C

СКОРОСТЬ

1800 ОБ/МИН

ДАТЧИК СКОРОСТИ


ЭЛЕМЕНТ ХОЛЛА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

**PID КОНТРОЛЬ
С ГИБКОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ**

УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ

МОДЕЛЬ	UED-10000DTS
НАЛИЧИЕ МЕШАЛКИ	да
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	10 л
МОЩНОСТЬ	60 Вт
ВЕС	9 кг

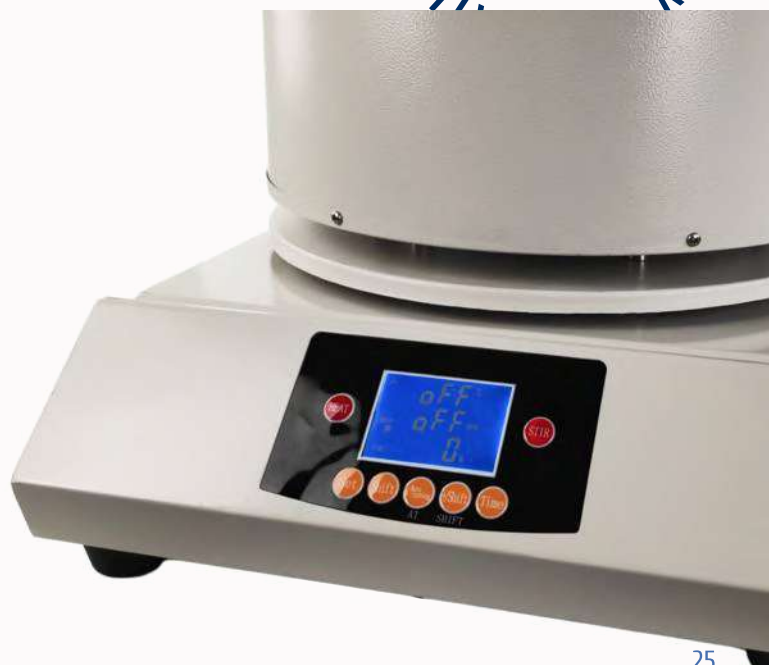

МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Муфельные печи UED применяются для нагрева, плавки, закалки различных металлов, обжига керамики, стерилизации инструментов и посуды на многих производствах в основном химических лабораториях и научных институтах



ОПЦИОНАЛЬНО

- МЕТОДИКА АТТЕСТАЦИИ
- АТТЕСТАЦИЯ

01

Камера муфельной печи изготовлена из силиката алюминия (керамика). Корпус из холоднокатаной стали с напылением, что обеспечивает эстетичность и долговечность изделия

02

Цифровое управление, позволяющее задать точную температуру нагрева в соответствии с выставленной программой. На панели управления можно отслеживать текущее значение температуры нагрева

03

Наличие сигнала включения аварийной защиты позволяет отслеживать состояние работы прибора



МАТЕРИАЛ
КАМЕРЫ

КЕРАМИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

**PID КОНТРОЛЬ
С ГИБКОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ**

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБОР

**АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**



МАХ ТЕМПЕРАТУРА 1000 °C	UED-2-10D	UED-7-10D	UED-16-10D	UED-30-10D
МАХ ТЕМПЕРАТУРА 1200 °C	UED-2- 12D	UED-7-12D	UED-16-12D	
ОБЪЕМ	2 л	7 л	16 л	30 л
РАЗМЕР РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ	120x200x80 мм	200x300x120 мм	250x400x160 мм	300x500x200 мм
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	587x661x441 мм	666x759x530 мм	734x862x602 мм	801x979x637 мм
ПИТАНИЕ	AC220В/11А	AC220В/18А	AC380В/12А	AC380В/18А

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛИТКИ

Лабораторные нагревательные плитки UED для нагревания, выпаривания и разложения проб при температуре до 350°C используются на различных производствах химических лабораториях и научных институтах.



УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ

01

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КОРПУС
ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ,
ПОКРЫТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ
НАПЫЛЕНИЕМ

02

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛИТКИ
ИЗ КЕРАМИКИ, БЫСТРО НАГРЕВАЕТСЯ,
А ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА СТАБИЛЬНА

03

ЦИФРОВОЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ ОТОБРАЖАЕТ
ФАКТИЧЕСКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

МАХ ТЕМПЕРАТУРА
НАГРЕВА

350°C

КОЛЕБАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

±3°C

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

**PID КОНТРОЛЬ
С ГИБКОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ**



МОДЕЛИ UED-5 И UED-6 ПОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗ ВИЛКИ
В КОМПЛЕКТЕ. ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К УСИЛЕННОЙ РОЗЕТКЕ ИЛИ
НАПРЯМУЮ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ



БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА	UED-3	UED-4	UED-5	UED-6
РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	300x300 мм	400x300 мм	500x300 мм	600x400 мм
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	400x300 мм	400x430 мм	500x430 мм	600x500 мм
МОЩНОСТЬ	1.6 кВт	1.8 кВт	2.2 кВт	4 кВт
ВЕС	20 кг	30 кг	35 кг	41 кг

МАСЛЯНЫЕ БАНИ

Масляные бани UED применяются для дистилляции, дегидратации, мацерации методом нагрева и обогащения химических реактивов, биопрепаратов и других лабораторных образцов до 250°C на многих производствах химических лабораториях и научных институтах.



УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ

01

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ МАСЛА ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МЕТОДОМ ШТАМПОВКИ С ВЫТЯЖКОЙ

02

КОРПУС ПРИБОРА ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ С ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ПУТЁМ НАПЫЛЕНИЯ ПОЛИМЕРА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭСТЕТИЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

03

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРУБКА НАГРЕВА БЫСТРО НАГРЕВАЕТ МАСЛО И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕРМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



МАХ ТЕМПЕРАТУРА
НАГРЕВА

280°C

КОЛЕБАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

±0,5°C

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

**PID КОНТРОЛЬ
С ГИБКОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ**

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБОР

СИГНАЛИЗАЦИЯ О ПЕРЕГРЕВЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ · УЗНАТЬ ЦЕНУ

БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА	UED-11D	UED-15D	UED-22D	UED-30D
РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	300x300 мм	400x300 мм	500x300 мм	600x400 мм
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	400x300 мм	400x430 мм	500x430 мм	600x500 мм
МОЩНОСТЬ	1.6 кВт	1.8 кВт	2.2 кВт	4 кВт



UED Group.

Комплексное оснащение лабораторий
Поставка оборудования, посуды и реактивов

Телефон

8 (812) 642 93 62 (отдел продаж)

Адрес

190020, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 17, лит. А

Эл. почта:

ued@ued-lab.ru – отдел продаж

buh1@ued-lab.ru – бухгалтерия

Режим работы:

Понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00

Суббота, воскресенье — выходной



**БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
НА НАШЕМ САЙТЕ**

ИНФОРМАЦИЯ В КАТАЛОГЕ ИМЕЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНА
КАК ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.